
Lóp: 15KTH

Họ và tên: Vũ Quang Nguyên

MSSV: 1523030

I. Trả lời lý thuyết:

1. Trình bày sơ đồ thí nghiệm đo phổ gamma sử dụng detector nhấp nháy NaI(Tl) được thực hiện tại phòng thí nghiệm.

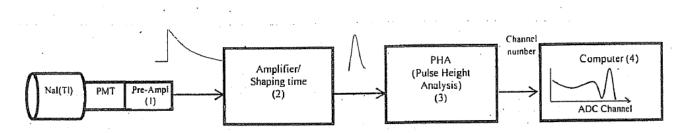

Sơ đồ thí nghiệm đo phổ gamma sử dụng detector nhấp nháy Na(Tl) được thực hiện tại phòng thí nghiệm.

2. Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ đo

Khi một bức xạ ion hoá đi vào detector nhấp nháy Na(Tl), sẽ kích thích nguyên tử hay phân tử, sau đó dịch chuyển về trạng thái cơ bản phát ra một photon ánh sáng -> qua lớp dẫn sáng, photon đập vào photocathode của PMT -> Tín hiệu điện có biên độ lớn -> Tín hiệu này đưa vào bộ tiền khuếch đại (1) sẽ tăng biên độ, qua xử lý xung ở bộ phận khuếch đại (2), và nắng xung (3) - > hiển thị phổ gamma ở màn hình máy tính.


3. Hãy trình bày chức năng của Oscilloscope trong điện tử hạt nhân:


Trình bày và đánh giá các xung tín hiệu điện tử của các mô đun điện tử hạt nhân.

Cụ thể, Máy Oscilloscope được mắc ở bộ phần tiền khuếch đại (1) và khuếch đại (2), thể hiển xung tín hiệu điện của theo thời gian thực. Dựa vào, xung tín hiệu đó, ta xác định được hằng số thời hằng của thiết bị tiền khuếch đại và khuếch đại.

Biểu thức liên hệ:
$$V = V_{o\!f\!f\!set} + V_0 e^{rac{-(t-t_0)}{ au}}$$

4. Hãy phối hợp trở kháng giữa thiết bị (1) có trở kháng $Z_1 = 50\Omega$ kết nối với thiết bị (2) có trở kháng $Z_2 = 1M\Omega$. (Vẽ trực tiếp lên hình)

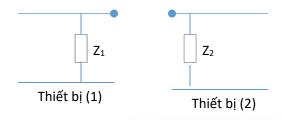

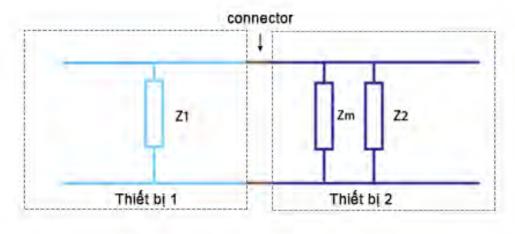


Để phối hợp trở kháng thiết bị (1) $Z_1 = 50\Omega$ với trở kháng thiết bị (2) $Z_2 = 1*10^6\Omega$, ta thực hiện kết nối trở kháng Z_m song song với Z_2 , để dòng điện đi từ Z_1 bằng Z_2 , m).

Ta có,
$$Z_1 = Z_{2,m} = 50\Omega$$
 với $\frac{1}{Z_{2,m}} = \frac{1}{Z_m} + \frac{1}{Z_2}$, từ đó rút ra $Z_m = 50\Omega$

II. Báo cáo kết quả đo thực nghiệm

1. Trình bày hình phổ về 03 xung tín hiệu từ thiết bị tiền khuếch đại (Pre-Amplifier) và từ bộ khuếch đại (Amplifier). Note, vẽ 03 xung trên 1 đồ thị đối với tiền khuếch đại, và 03 xung trên 1 đồ thị đối với bộ khuếch đại.

Xung tiền khuếch đại

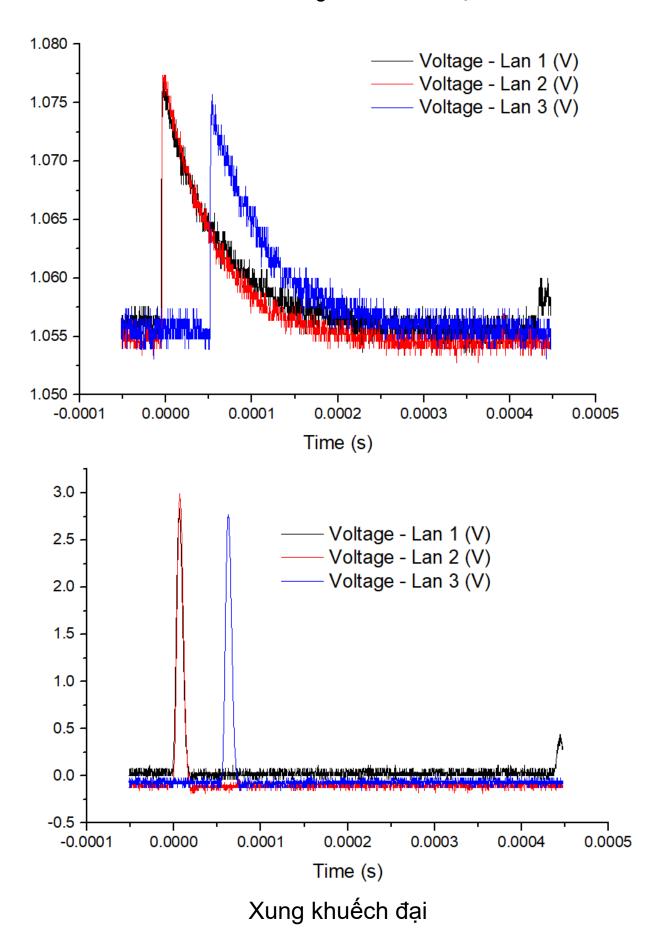


2. Dựa vào số liệu đo được xung tín hiệu từ tiền khuếch đại (Pre-amplifier) của detector nhấp nháy NaI(Tl), hãy xác định chu kỳ xã (decay time constant) của thiết bị tiền khuếch đại:

Xung 1:
$$\tau(\mu s) = 69.0817 \pm 0.5065$$


Xung 2:
$$\tau(\mu s) = 60.4183\pm0.2818$$
 ; $\overline{\tau} \pm \Delta \tau = 64.6111\pm0.4459$ (μs)

Xung 3:
$$\tau$$
(μs) = 64.3334±0.5492

3. Trình bày phổ năng lượng gamma đo trên nguồn chuẩn Co-60 và Ba-133

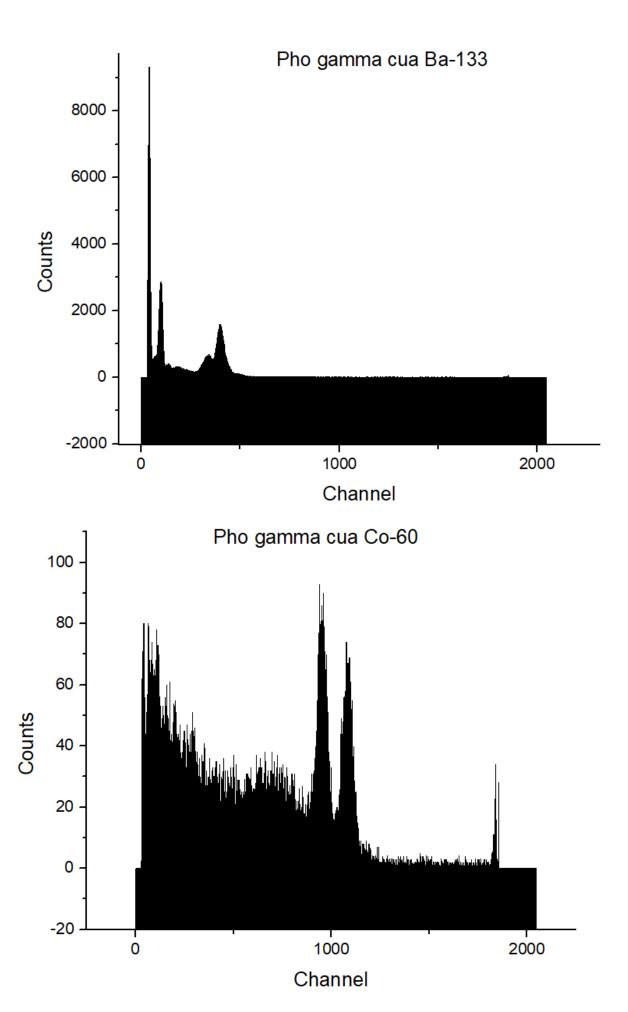


4. Xác định đường chuẩn năng lượng: E(keV) = a.ch + b

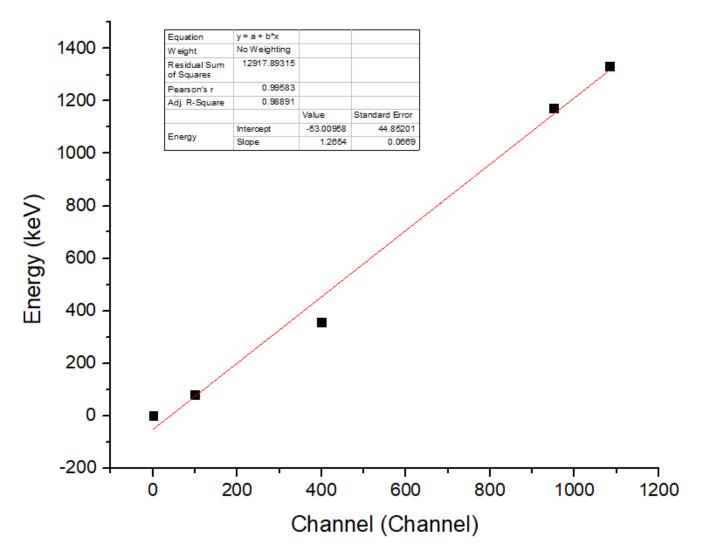

| | Kênh (Channel) | Energy (keV) |
|-------|----------------|--------------|
| 133Ba | 100 | 80.9979 |
| | 400 | 356.0129 |
| 60Co | 951 | 1173.228 |
| | 1083 | 1332.492 |

Đường chuẩn năng lượng E(keV) = -53.00958 + 1.2654* Channel

5. Trình bày phổ năng lượng đo phông môi trường.

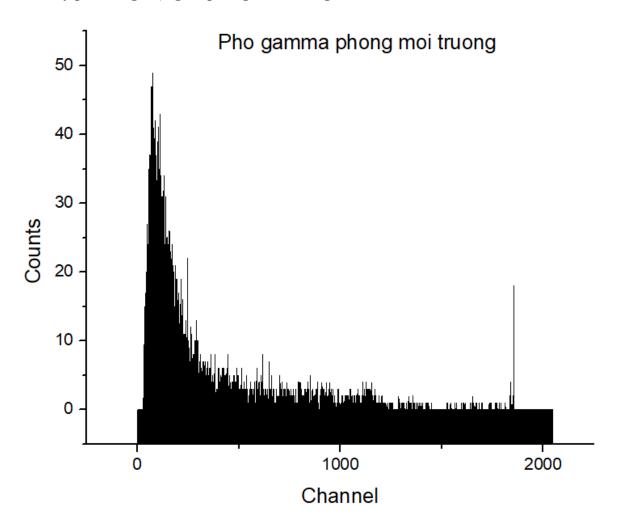

6. Xác định các đồng vị phóng xạ có trong phổ đo môi trường

Các nguyên tố trong phông môi trường

| Nguyên tố trong phổ phông | Kênh tương ứng | Năng lượng (keV) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 24Na@ 1 368.630 keV | 1131 | 1378.15782 |
| 24Na@ 2 754.049 keV | 1856 | 2295.57282 |
| 131I @364.489 keV | 331 | 365.83782 |
| 57Co@122.06065keV | 147 | 133.00422 |
| 132I@954.55 keV | 795 | 952.98342 |
| 192Ir@316.506 keV | 286 | 308.89482 |
| 56Co@2034.752 keV | 1651 | 2036.16582 |
| 56Co@1238.2736 keV | 1023 | 1241.49462 |


BÀI 02: KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG SỐ ĐẾM VÀ XÁC ĐỊNH VÙNG LÀM VIỆC CỦA DETECTOR CHỨA KHÍ

Họ và tên: Vũ Quang Nguyên – 1523030

1. Lập bảng số liệu của số đếm N và hiệu điện thê V

| V (volt) | 260 | 280 | 300 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N (counts) | 1521 | 1756 | 1894 | 1990 | 2198 | 2178 | 2253 | 2491 | 2691 | 3050 | 3091 |

2. Đồ thị biểu diễn số đếm và hiệu điện thế trong vùng tỷ lệ hạn chế (Vùng 4) và vùng Plateau (Vùng 5)

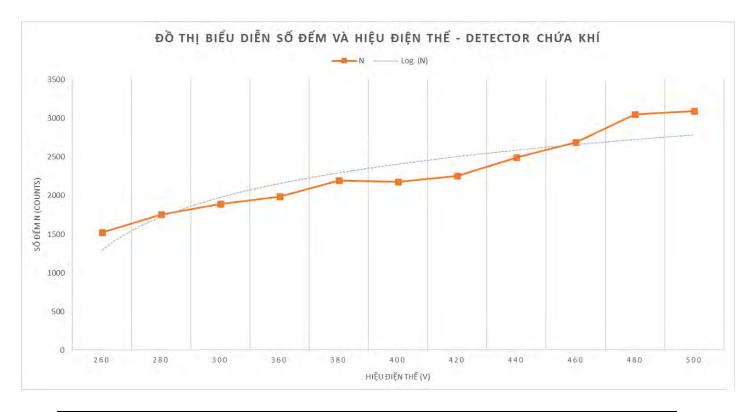

| Điện thế (V) | Xác định Vùng làm việc | |
|--------------|---|--|
| (260 – 420) | Đồ thị dạng tuyến tính – VÙNG 3 | |
| (420 – 480) | Số đếm tăng nhanh theo điện thế - Vùng 4 | |
| (480 – 600) | Điện thế tăng dần nhưng số đếm không đổi (rất ít) – Vùng Plateau | |

3. **Kết Luận:** Vùng làm việc của ống đếm Geiger – Muller là Vùng Plateau (480 - 600) V

Bài 3: XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐẾM VÀ SAI SỐ

Họ tên: Vũ Quang Nguyên MSSV: 1523030 – Lớp: 15KTH

1. Trình bày kết quả đo và phân tích

Thời gian đo t = 60s, số lần đo k = 10

| STT | N _p (counts) | N (counts) | $\left(N_{P_i}-\overline{N_p}\right)^2$ | $\left(N_i - \overline{N}\right)^2$ |
|-----|-------------------------|------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 52 | 2021 | 68.89 | 4515.84 |
| 2 | 56 | 2113 | 18.49 | 615.04 |
| 3 | 66 | 2076 | 32.49 | 148.84 |
| 4 | 61 | 2085 | 0.49 | 10.24 |
| 5 | 61 | 2074 | 0.49 | 201.64 |
| 6 | 57 | 2123 | 10.89 | 1211.04 |
| 7 | 62 | 2095 | 2.89 | 46.24 |
| 8 | 55 | 2010 | 28.09 | 6115.24 |
| 9 | 62 | 2118 | 2.89 | 888.04 |
| 10 | 71 | 2167 | 114.49 | 6209.44 |

- 2. Trình bày tốc độ đếm trung bình của phông và của nguồn
 - Tốc độ đếm trung bình của nguồn: $\frac{1}{n} = \frac{\overline{N}}{t} = 34.8033$ (counts/s)
 - Tốc độ đếm trung bình của phông $\overline{n_p} = \frac{\overline{N_p}}{t} = 1.005$ (counts/s)
 - Tốc độ đếm thật của nguồn $\overline{n_s} = \overline{n} \overline{n_p} = 33.7983$ (counts/s)
- 3. Trình bày kết quả sai số của tốc độ đếm (k=10, t=60s)
 - Dựa vào công thức $\Delta n = \frac{\Delta \overline{N}}{t} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{k} \left(N_i \overline{N}\right)^2}}{\frac{k(k-1)}{t}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} \left(N_i \overline{N}\right)^2}}{\frac{10(10-1)}{60}}$, ta tính được Sai số tốc độ đếm nguồn: $\Delta n = 0.2482$
 - - Sai số tốc độ đếm phông: $\Delta \overline{n_p} = 0.0294$
 - Sai số tốc độ đếm thật của nguồn:

dựa vào
$$\Delta \overline{n_s} = \sqrt{\left(\Delta \overline{n}\right)^2 + \left(\Delta \overline{n_p}\right)^2}$$
, ta tính ra $\Delta \overline{n_s} = 0.2499$

4. Trình bày kết quả tốc độ đếm thật của nguồn: $\overline{n_s} = 33.7983 \pm 0.2499$ (counts/s)

BÀI 4: PHÂN BỐ THỐNG KÊ TRONG PHÂN RÃ HẠT NHÂN

Họ và tên: Vũ Quang Nguyên

MSSV: 1523030 Lóp: 15KTH

1. Lý thuyết

Số đếm trung bình $\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i}{k}$

a. Số đếm trung bình nhỏ hơn 20: Phân rã hạt nhân tuân theo phân bố Poisson

$$P(n_i) = \frac{n^{-n_i}e^{-n}}{n_i!}$$

b. Số đếm trung bình lớn hơn 20: Phân rã hạt nhân tuân theo phân bố Gauss


$$P(n_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{\frac{-(n_i - \bar{n})^2}{2\bar{n}}}$$

2. Khảo sát phân bố Poisson

a. Bảng kết quả đo (time = 10s)

| Số đếm | Tần số thực nghiệm | Xác suất thực nghiệm | Xác suất Lý thuyết |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0 | 36 | 0.146938776 | 0.018315639 |
| 1 | 38 | 0.155102041 | 0.073262556 |
| 2 | 58 | 0.236734694 | 0.146525111 |
| 3 | 58 | 0.236734694 | 0.195366815 |
| 4 | 28 | 0.114285714 | 0.195366815 |
| 5 | 14 | 0.057142857 | 0.156293452 |
| 6 | 5 | 0.020408163 | 0.104195635 |
| 7 | 7 | 0.028571429 | 0.059540363 |
| 8 | 1 | 0.004081633 | 0.029770181 |
| 9 | 0 | 0 | 0.013231192 |
| 10 | 0 | 0 | 0.005292477 |
| 11 | 0 | 0 | 0.001924537 |
| 12 | 0 | 0 | 0.000641512 |

b. Vẽ đồ thị thể hiện xác suất lý thuyết và thực nghiệm theo số đếm

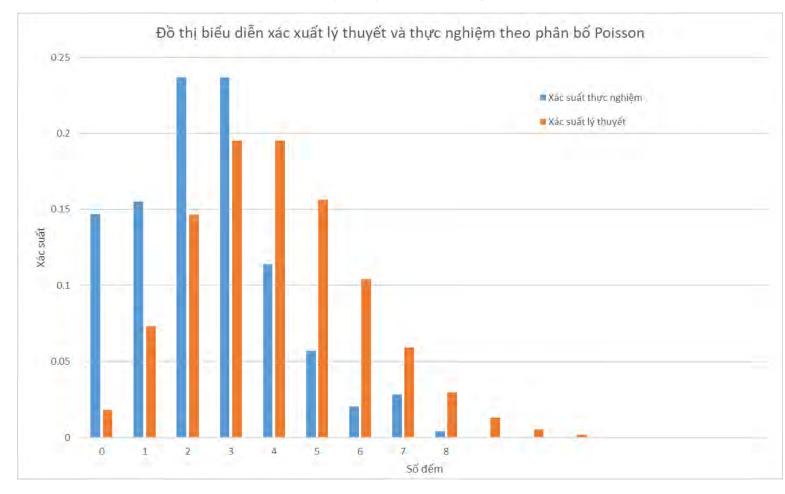

c. Nhận xét

Dựa vào kết quả ghi nhận được của phép đếm bức xạ trong phân rã hạt nhân Ra-226, ta nhận thấy rằng:


- Đồ thị biểu diễn xác suất thực nghiệm có hình dạng tương đối giống dạng phân bố Poisson, nếu bỏ qua các sai khác tương đối với đồ thị xác suất lý thuyết Poisson.
- Sự sai lệch trong quá trình thí nghiệm là do bản chất ngẫu nhiên của quá trình phân rã hạt nhân, đồng thời sai số trên cũng có đóng góp của hệ thiết bị điện tử ghi đo, bên cạnh đó thì các thao tác của người làm trong thực hiện cũng góp phần nhỏ dẫn đến sai lệch đến kết quả đo.

3. Khảo sát phân bố Gauss

a. Bảng kết quả đo (time = 4s)

| Số đếm | Tần số thực nghiệm | Xác suất thực nghiệm | Xác suất lý thuyết (Phân bố Gauss) |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 14 | 2 | 0.005970149 | 0.001251807 |
| 15 | 0 | 0 | 0.002081445 |
| 16 | 1 | 0.002985075 | 0.003345575 |
| 17 | 0 | 0 | 0.005198221 |
| 18 | 1 | 0.002985075 | 0.007807589 |
| 19 | 1 | 0.002985075 | 0.011335932 |
| 20 | 4 | 0.011940299 | 0.015910203 |
| 21 | 5 | 0.014925373 | 0.021586008 |
| 22 | 6 | 0.017910448 | 0.028310472 |
| 23 | 11 | 0.032835821 | 0.035892197 |
| 24 | 13 | 0.03880597 | 0.043987687 |
| 25 | 21 | 0.062686567 | 0.052112314 |
| 26 | 12 | 0.035820896 | 0.059679853 |
| 27 | 22 | 0.065671642 | 0.066068323 |
| 28 | 22 | 0.065671642 | 0.07070286 |
| 29 | 28 | 0.08358209 | 0.073140652 |
| 30 | 39 | 0.11641791 | 0.073140652 |
| 31 | 25 | 0.074626866 | 0.07070286 |
| 32 | 19 | 0.056716418 | 0.066068323 |
| 33 | 25 | 0.074626866 | 0.059679853 |
| 34 | 19 | 0.056716418 | 0.052112314 |
| 35 | 12 | 0.035820896 | 0.043987687 |
| 36 | 11 | 0.032835821 | 0.035892197 |
| 37 | 6 | 0.017910448 | 0.028310472 |
| 38 | 12 | 0.035820896 | 0.021586008 |
| 39 | 6 | 0.017910448 | 0.015910203 |
| 40 | 6 | 0.017910448 | 0.011335932 |
| 41 | 2 | 0.005970149 | 0.007807589 |
| 42 | 1 | 0.002985075 | 0.005198221 |
| 43 | 0 | 0 | 0.003345575 |
| 44 | 2 | 0.005970149 0.002081445 | |
| 45 | 1 | 0.002985075 | 0.001251807 |

b. Vẽ đồ thị thể hiện xác suất lý thuyết và thực nghiệm theo số đếm

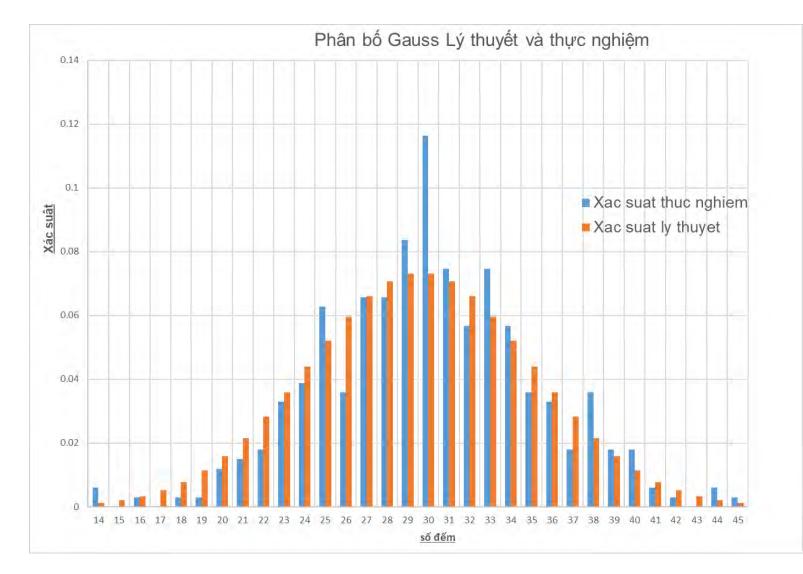

c. Nhận xét

- Đồ thị biểu diễn xác suất thực nghiệm có hình dạng giống dạng phân bố Gauss, cụ thể số đếm thực nghiệm trung bình là 29.5 (counts) > 20 (counts)
- Trong phân rã hạt nhân là quá trình ngẫu nhiên, sự thăng giáng số đếm luôn thăng giáng quanh vị trí trung bình, do đó, trong đo lường phóng xạ, thì sự phân rã hạt nhân tuân theo phân bố Gauss hoặc Poisson.


BÀI 08: XÂY DỰNG PHỔ ĐƯỜNG CHUẨN NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT NGUỒN PHÓNG XA

Ho và tên: Vũ Quang Nguyên - 1523030

Bảng 1 – Bảng số liệu kết quả đo Nguồn Co-60, Na -22 và Cs -137

Công thức: $Energy[keV] = 5.903 + 2.408.10^{-1}$ Channel; $FWHM[keV] = 3.96 - 2.965.10^{-2}$ $E^{1/2}$

| Số kênh (Channel) | Năng lượng (keV) |
|-------------------|------------------|
| 2098 | 511 |
| 2722 | 661.657 |
| 4848 | 1173.228 |
| 5268 | 1274.537 |
| 5508 | 1332.492 |

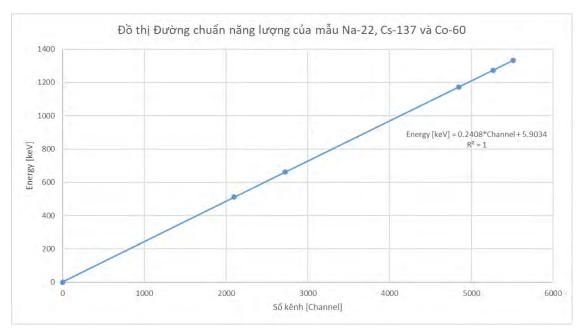

b. Xác định nguyên tố X

Bảng 2. Số liệu thể hiện tương ứng giữa Số kênh và Năng lượng của nguyên tố \mathbf{X}

| Số kênh | Năng lượng [keV] |
|---------|------------------|
| 532 | 134 |
| 1123 | 276.3 |
| 1234 | 303.1 |
| 1455 | 356.3 |
| 1569 | 383.8 |

Áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu

Đặt phương trình đường chuẩn năng lượng có dạng $y = a_1 + a_2 x$,

Trong đó, Năng lượng [keV] tương ứng với y, số kênh (channel) tương ứng với x


| i | X_i | Y_i |
|---|-------|-------|
| 1 | 1123 | 276.3 |
| 2 | 1234 | 303.1 |
| 3 | 1455 | 356.3 |
| 4 | 1569 | 383.8 |


Ta có, biến a1 và a2 thoả mãn hệ sau
$$\begin{cases}
4a_1 + \left(\sum_{i=1}^4 x_i\right) a_2 = \sum_{i=1}^4 y_i \\
\left(\sum_{i=1}^4 x_i\right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^4 x_i^2\right) a_2 = \sum_{i=1}^4 x_i y_i
\end{cases}$$

Thay số
$$\begin{cases} 4a_1 + 5381.a_2 = 1319.5 \\ 5381.a_1 + 7362671.a_2 = 1804909 \end{cases}$$
, giải hệ ta thu được
$$\begin{cases} a_1 = 5.709 \\ a_2 = 0.2409 \end{cases}$$


Phương trình đường chuẩn năng lượng Energy = 5.709+0.2409*Channel

Vậy nguyên tố X là Ba-133

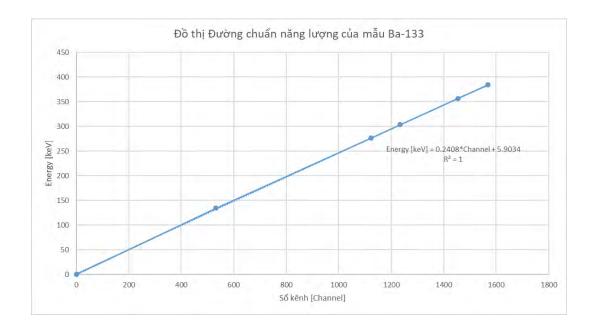

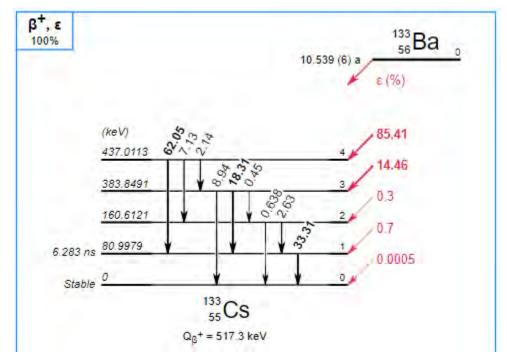

(Nguồn tham khảo http://www.nucleide.org/Laraweb/index.php)

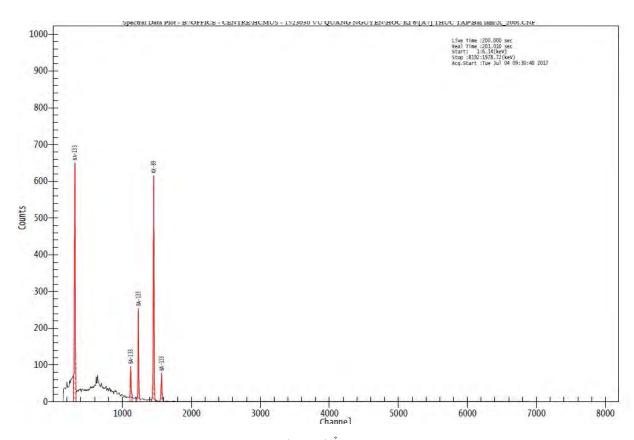

Hình 3. Phổ gamma của Ba-133